2026.10.26

マンモグラフィポジショニングコンテスト

一般投票審査説明

（Sonic DICOM®PACS Cloud 説明書）

日本乳癌検診学会　研修委員会

※本書の転載・複写は禁止です。

Sonic DICOM® は株式会社ディジタルの製品です。 https://ja.sonicdicom.com/

審査のお知らせとお願い

- Sonic DICOM®PACS Cloud上のすべての画像について、複製や撮影はいかなる理由またいかなる方法においても禁止です。
- Sonic DICOM®PACS Cloudユーザアカウントの二次配布は禁止です。厳重な管理をお願い申し上げます。
- 審査の公平性とプライバシー保護のためSonic DICOM®PACS Cloudの機能を一部制限しております。あらかじめご了承ください。
- Sonic DICOM®PACS Cloudの同時接続数制限のため、混み合う時間帯は接続できない場合がございます。その際はお時間をあけて接続していただきますようお願い申し上げます。
- 携帯電話等通信回線によっては通信料が必要です。各自のご負担で閲覧くださいますようお願い申し上げます。

〇マンモグラフィポジショニングコンテスト審査に関する問い合わせ先
市立三次中央病院　放射線科　山田和幸
Tel:0856-22-3611（代表） Email：kyamada1895@gmail.com

①ログインアカウント情報の取得

クラウドPACSアカウント情報を取得してください。

下記URLからユーザ登録してください（下記URLをクリック）。
登録後にアカウントが表示されます。

※アカウント情報は再表示されませんので、ユーザご自身で
記録しておいてください。

https://forms.gle/VdnUzyi9TWSzZsU36



②Sonic DICOM® PACS Cloudにログイン

インターネットに接続されたPCのブラウザソフトウエアから

Sonic DICOM® PACS Cloudの下記URLにアクセスしログインしてください（下記URLをクリック）。

https://qrfs4mdm.jp1.sonicpacs.com/viewer/#/login

ログイン画面




対応ブラウザソフトウエア

- Google Chorome
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorerはご使用いただけません。


③リストから観察対象を選択


観察する検査リストの□にチェックし右上の「ビューワ」をクリックしてください。
1検査ごとに「選択」→「ビューワ」を繰り返していただくと検査切り替えが容易です。
検査をまとめて選択する方と操作が多く煩雑です。

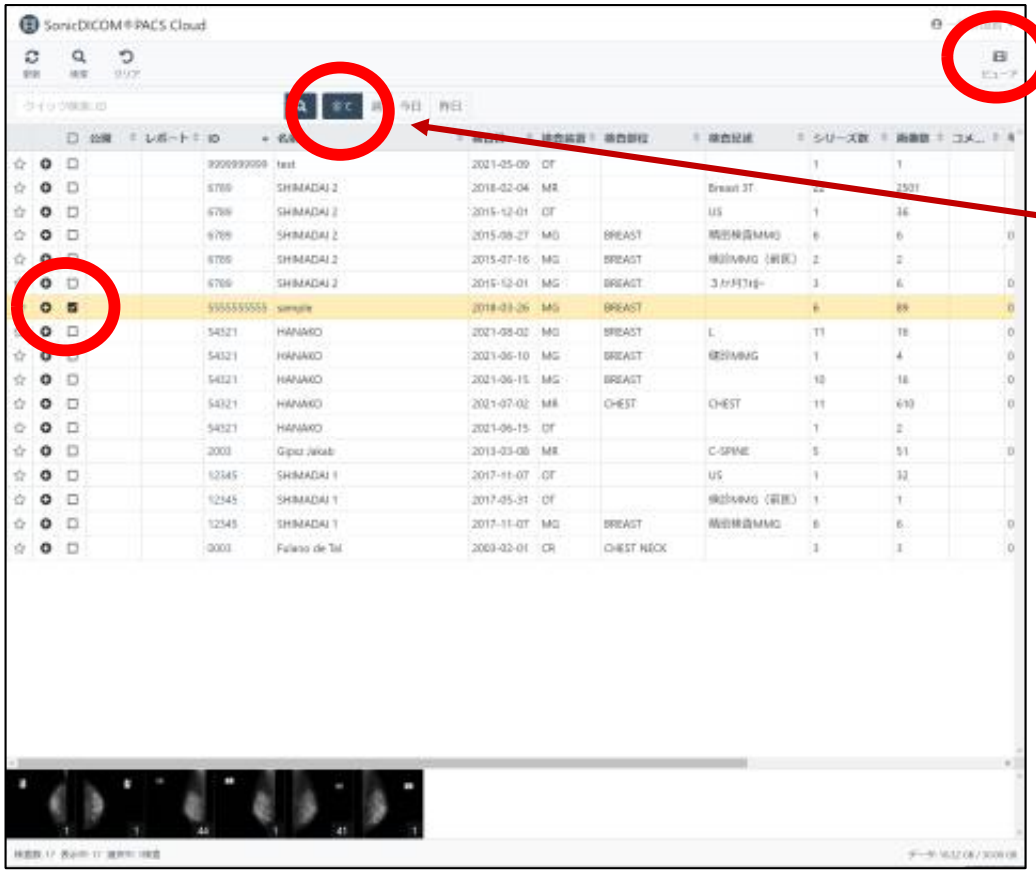

④表示調整

ブラウザウィンドウの幅で左右マンモグラフィの表示間隔が変わります。
適宜ウィンドウ幅を調整すると胸壁側をそろえて表示することが可能です。

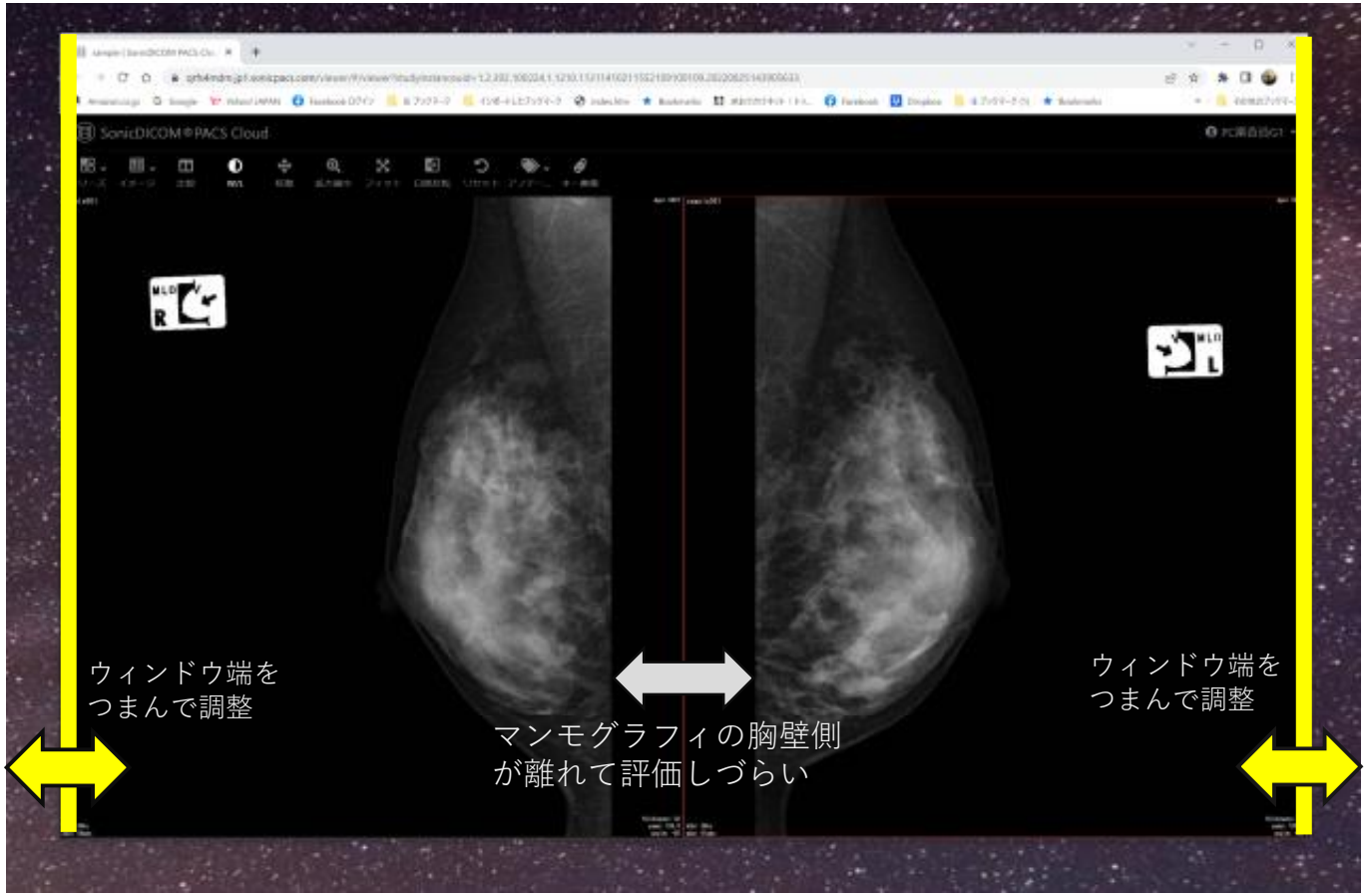

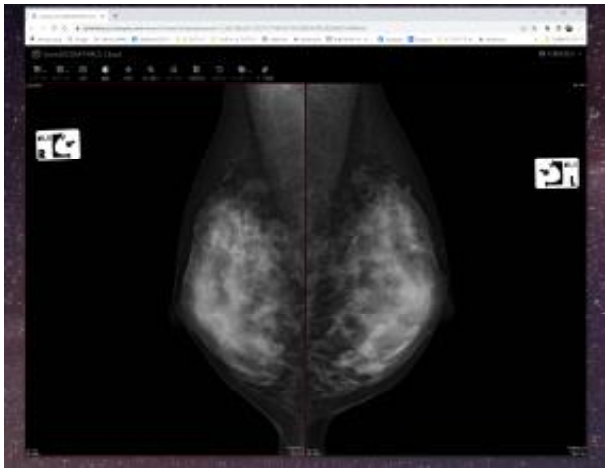


胸壁側をそろえて表示できます。
上下の余白も調整でき、マンモグラフィに
撮影情報を重ねず表示できます

④観察・評価

サムネールには選択患者すべての検査が表示されます。
また適宜ツールをご利用ください。

ツール

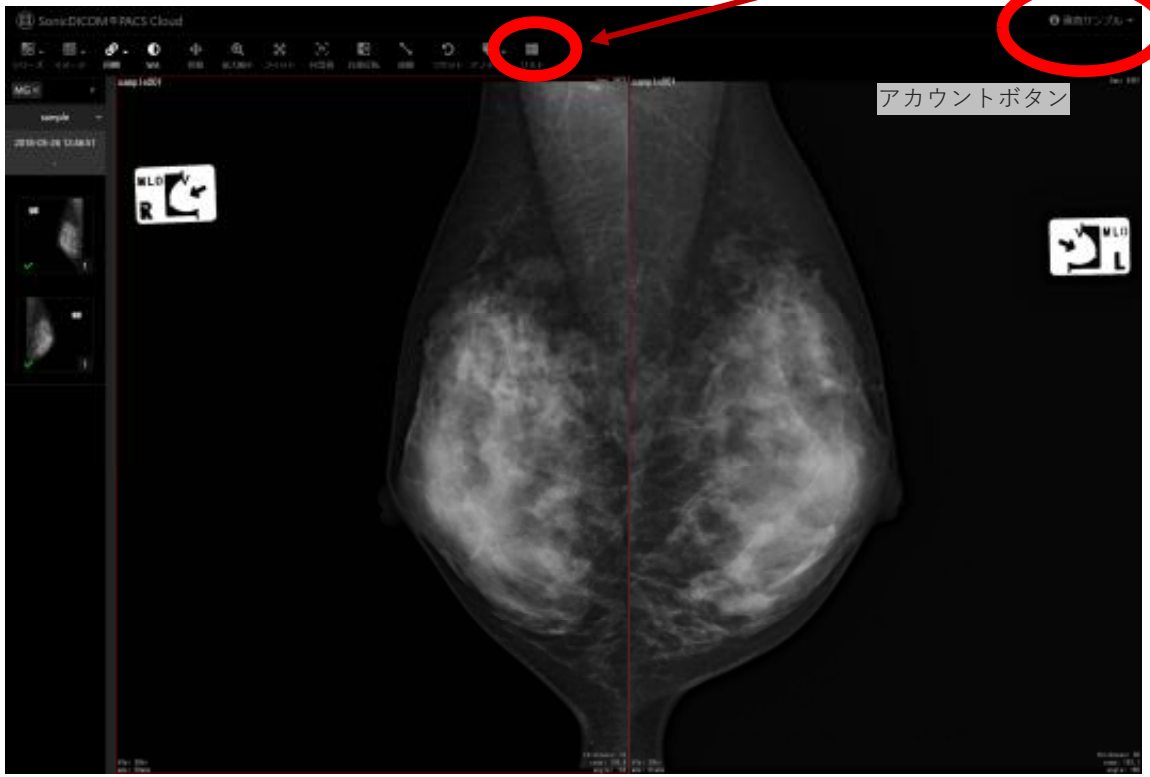

サムネール

リストを表示します。
リスト画面に戻ったら必ず画面上部の「全て」を選択してください。
（②を参照）

ユーザメニュー



リストを表示します。
こちらからはリストの「全て」が選択されて表示されます。

プリセットマウスジェスチャー


マウスボタン	機能
左	WW/WL
中 （ホイール）	拡大・縮小
右	移動

左　中　右
（ホイール）



⑤観察・評価

症例観察を重ねるとブラウザタブが増えます。タブごとに症例・リストを表示させたまま、タブ選択で表示切替えが可能です。
多数のタブは表示が重くなる可能性がございます。その際は不要なタブから削除してください。

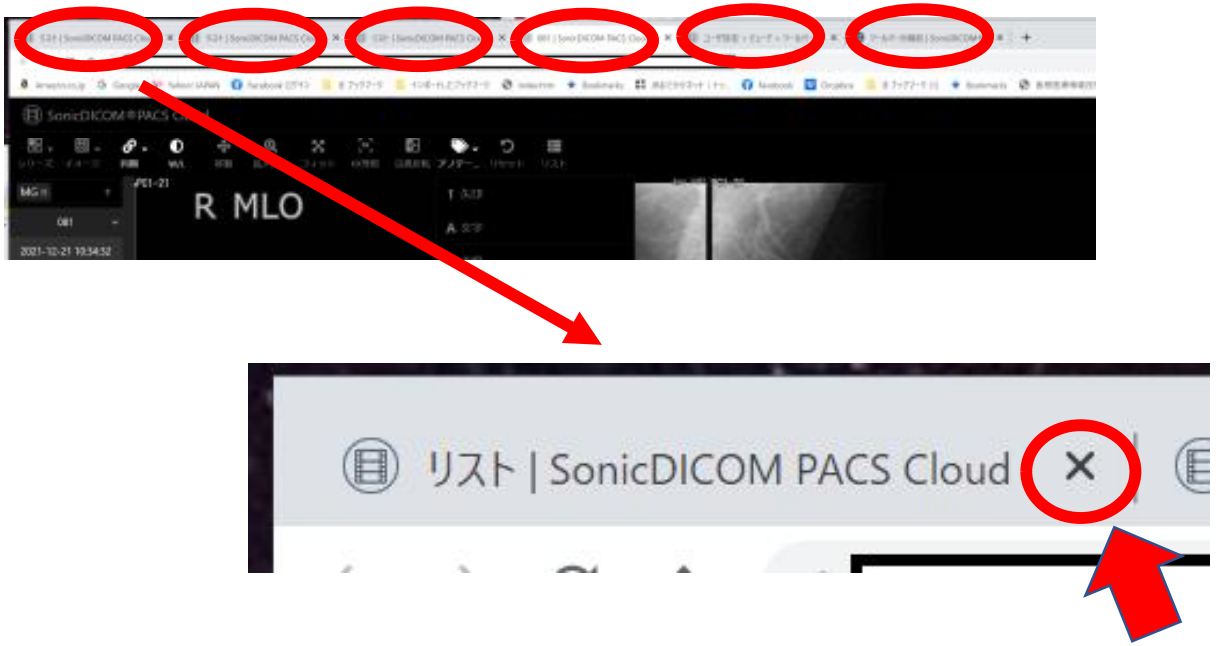

タブ削除の場合はこの「X」
をクリックして下さい。

⑥投票

マンモグラフィポジショニングコンテスト一般投票フォームから投票してください。
（Googleフォーム 下記リンク、もしくはQRコードから投票してください。）

https://forms.gle/E4k22z92cxjPvGg39



※一般投票締切
令和8年11月２日（月）21:00

○ 補足　ユーザマニュアル 参照方法

ビューワ操作方法の詳細はユーザマニュアルを参照してください。

ビューワ画面右上
アカウントボタン
➡ ユーザメニュー ➡ ドキュメントメニュー ➡ ユーザマニュアル









※ 審査の公平性とプライバシー保護のため、機能の一部を制限しておりますことをあらかじめご了承ください。