2026.10.20

第３６回日本乳癌検診学会学術総会

総合判定セミナー

Sonic DICOM®PACS Cloud 説明書

日本乳癌検診学会　研修委員会

※本書の転載・複写は禁止です。

Sonic DICOM® は株式会社ディジタルのサービスです。https://ja.sonicdicom.com/

お知らせとお願い

- Sonic DICOM®PACS Cloud上のすべての画像について、いかなる理由、またいかなる方法においても複製や撮影は禁止です。
- プライバシー保護のためSonic DICOM®PACS Cloudの機能を一部制限しております。あらかじめご了承ください。
- Sonic DICOM®PACS Cloudの同時接続数制限のため、混み合う時間帯は接続できない場合がございます。その際はお時間をあけて接続していただきますようお願い申し上げます。
- 携帯電話等の通信回線によっては通信料が必要です。各自のご負担で閲覧くださいますようお願い申し上げます。

○クラウドPACS利用についての問い合わせ先
日本乳癌検診学会　研修委員　山田和幸
Email:kyamada1895@gmail.com

①ログインアカウント情報の取得

クラウドPACSアカウント情報を取得してください。

下記URLからユーザ登録してください（下記URLをクリック）。
登録後にアカウントが表示されます。

※アカウント情報は再表示されませんので、ユーザご自身で
記録しておいてください。


https://forms.gle/1zD7cNzGXxWxedGPA

②Sonic DICOM® PACS Cloudにログイン

インターネットに接続されたPCのブラウザソフトウエアから
Sonic DICOM® PACS Cloudの下記URLにアクセスしログインしてください（下記URLをクリック）。

https://qrfs4mdm.jp1.sonicpacs.com/viewer/#/login

ログイン画面

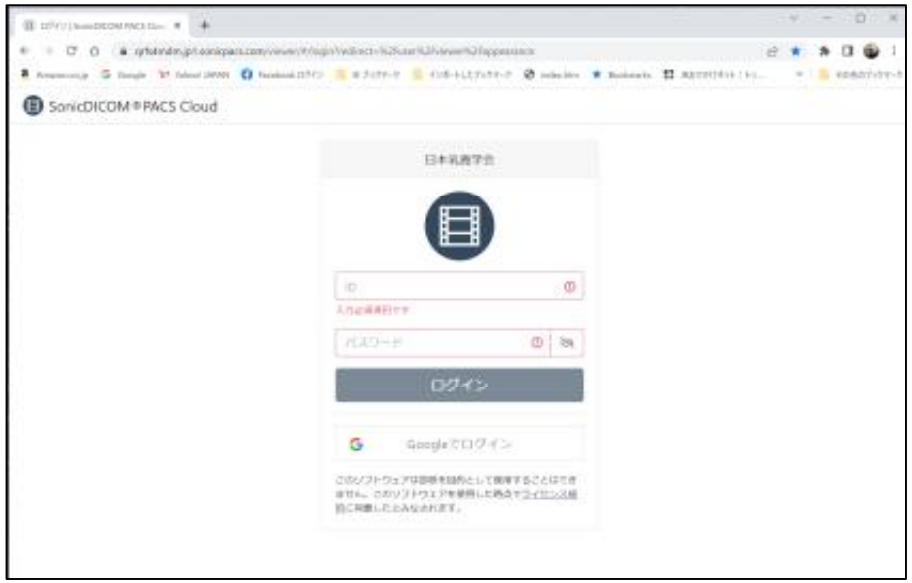

別にお伝えしたユーザID、パスワードをご利用下さい

対応ブラウザソフトウエア

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorerはご使用いただけません。

③リストから観察対象を選択

観察する検査リストの□にチェックし右上の「ビューワ」をクリックしてください。
1症例ごとに「選択」→「ビューワ」を繰り返していただくと検査切り替えが容易です。



「全て」が選択されていることをご確認ください

超音波検査画像について


検査部位


・BREAST	マンモグラフィ
・US MOVIE	動画
・US	静止画

総合判定は本来MGから見ていくのが手順ですが、システムの都合上、USが先に表示されています。

④表示調整（マンモグラフィ）

ブラウザウィンドウの幅で左右マンモグラフィの表示間隔が変わります。
適宜ウィンドウ幅を調整すると胸壁側をそろえて表示することが可能です。

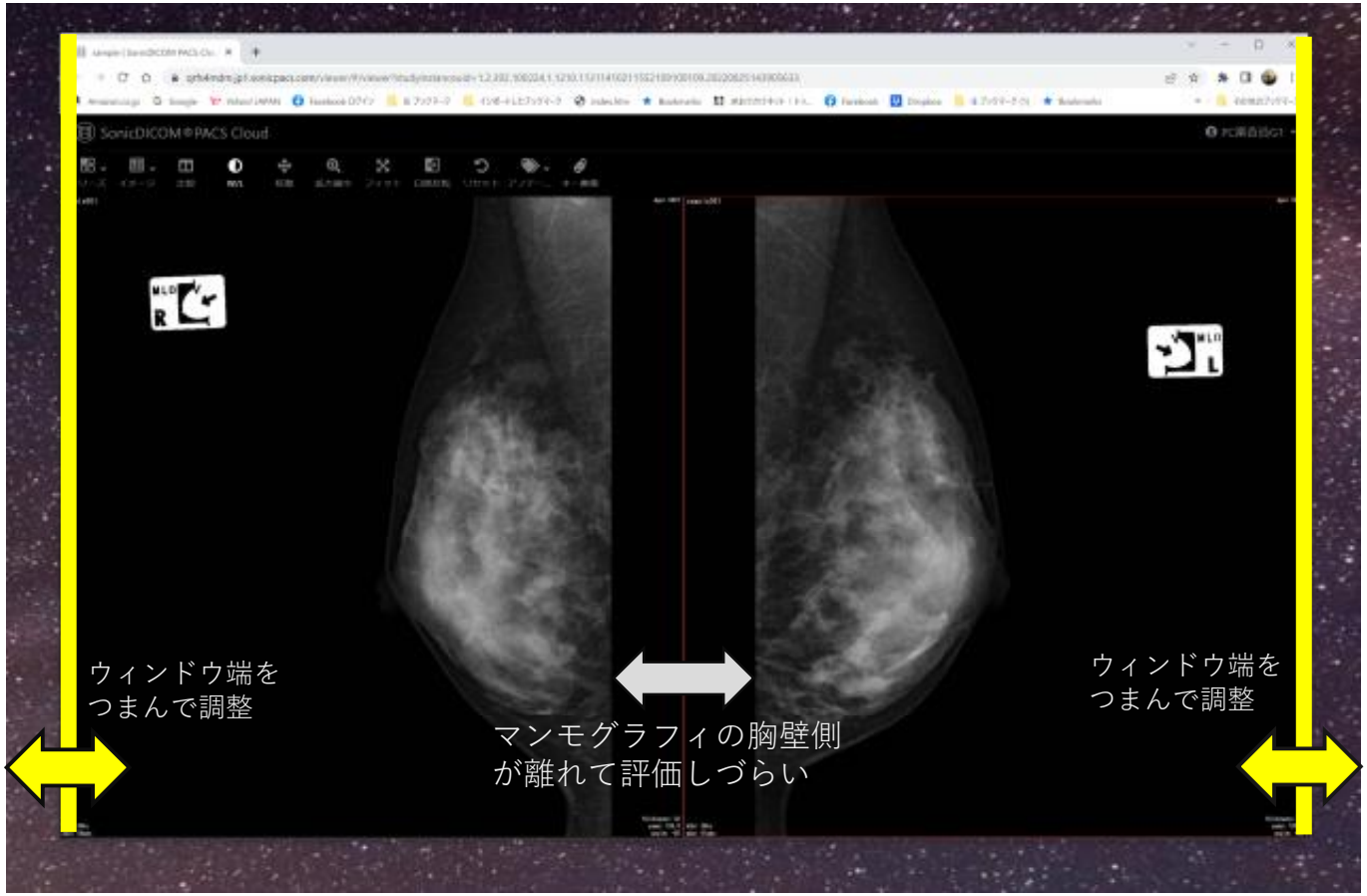

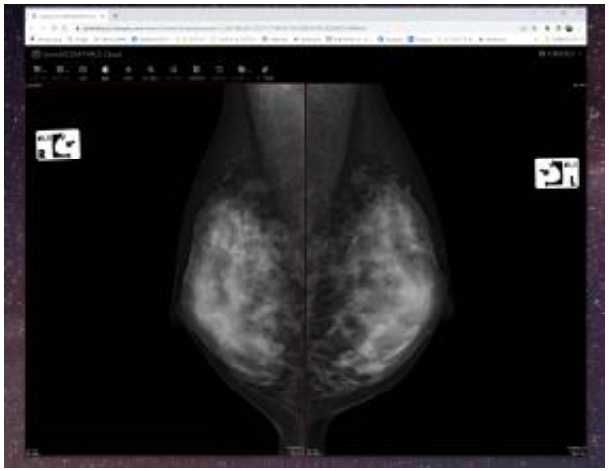

胸壁側をそろえて表示できます。
上下の余白も調整でき、マンモグラフィに
撮影情報を重ねず表示できます

⑤観察・評価

サムネールには選択患者すべての検査が表示されます。
また適宜ツールをご利用ください。

ツール

サムネール



ユーザメニュー



リストを表示します。
こちらからはリストの「全て」が選択されて表示されます。


プリセットマウスジェスチャー


マウスボタン	機能
左	WW/WL
中 （ホイール）	拡大・縮小
右	移動

左　中　右
（ホイール）



表示シリーズ・イメージの選択

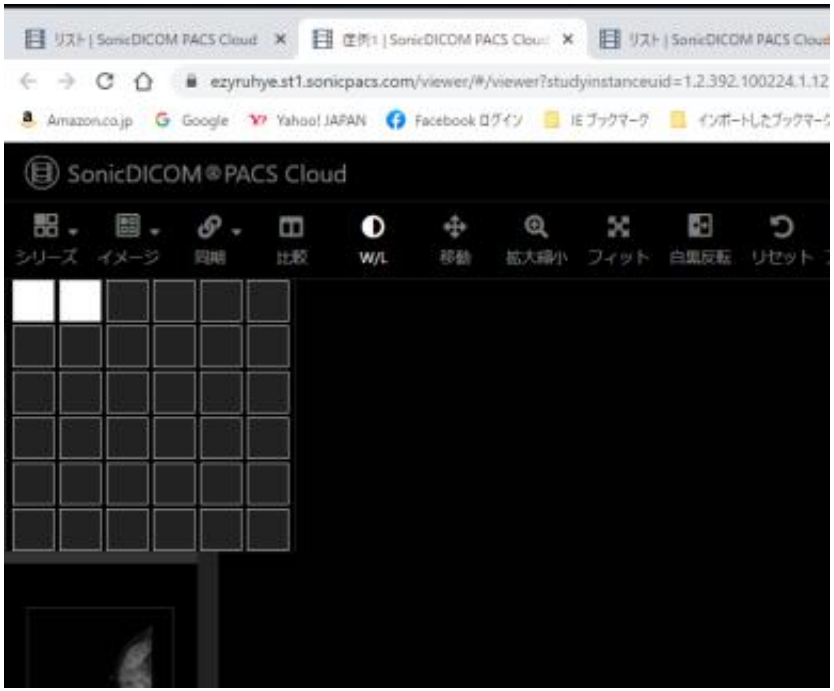

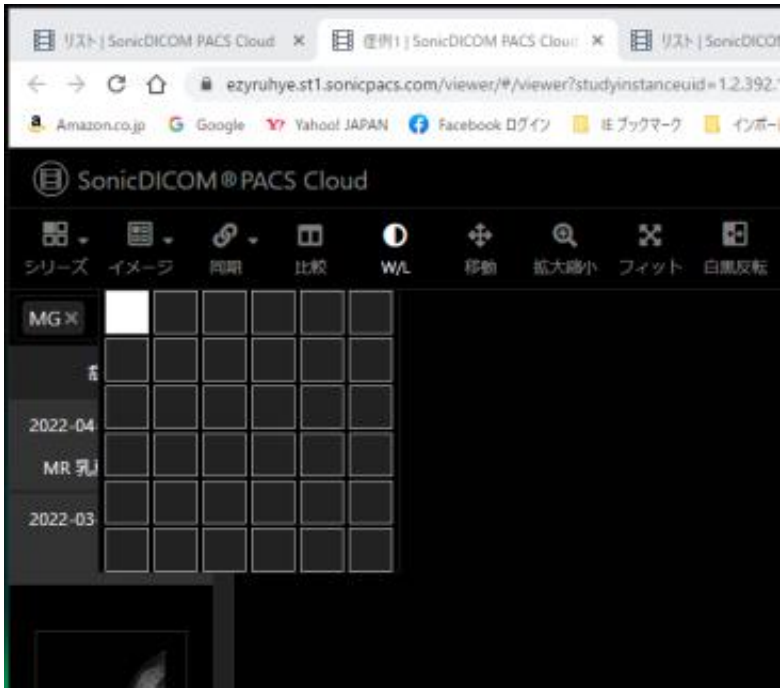


ビュワー表示設定を適宜変更して表示してください。

①マンモグラフィはそのままで表示できる検査と、シリーズを増やして表示する検査、それぞれの場合があります。

②シリーズ表示を増やす場合：CTやMRI等シリーズが多数ある検査

③イメージ表示を増やす場合：USやRF等シリーズ内に部位や目的が異なる画像がある検査

超音波検査画像表示（動画再生方法）

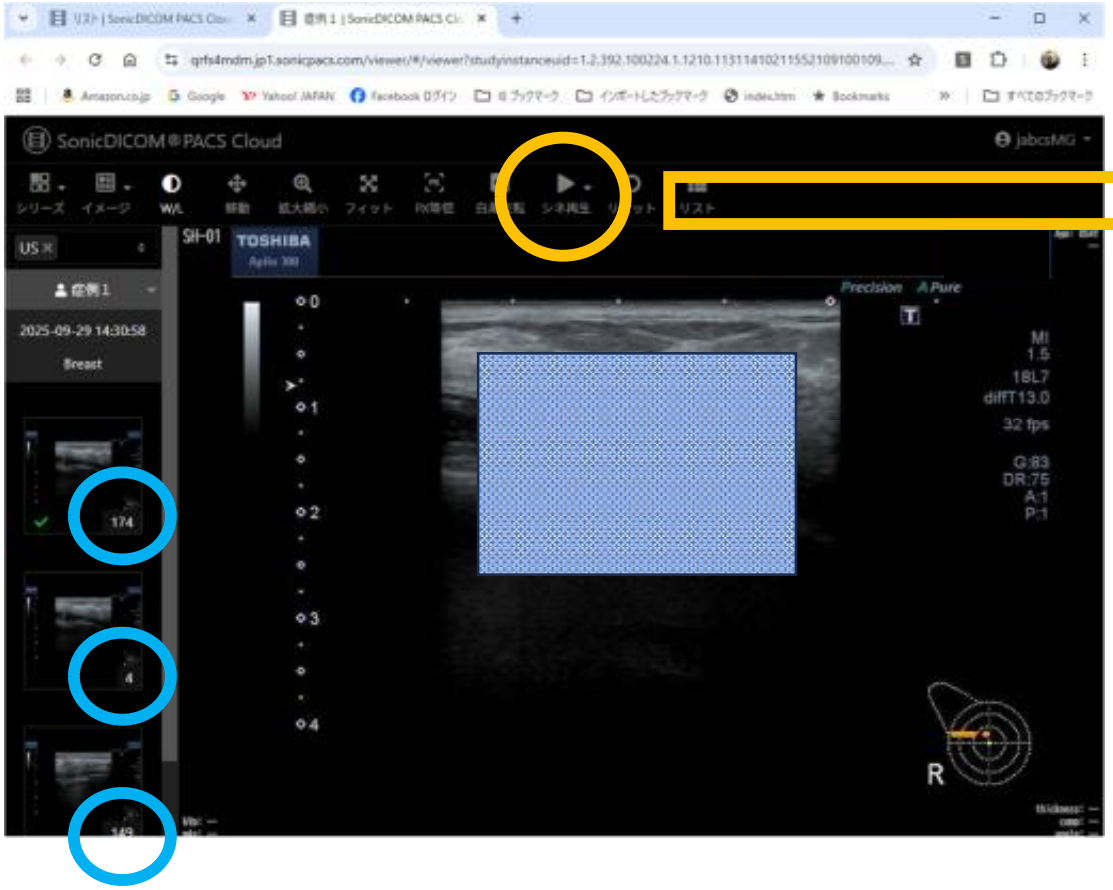

シリーズ画像数

シネ再生コントロール



超音波検査画像はシリーズごとにサムネール表示されます。

① サムネール右下の数字は画像枚数を表します。**20以上は動画シリーズです。**


② **画像数20以上では表示可能になるまで時間がかかります。**あらかじめご了承ください。

③ 動画シリーズはツールバー「シネ再生」をクリックしてください。再生が始まります。

④ 再生スピードはスライダーで調整してください。

検査シリーズサムネール操作

画面左側にリストで選択した検査およびシリーズごとにサムネールが表示されています。
マウス操作で表示するモダリティを限定したり、表示画像を選択することができます。

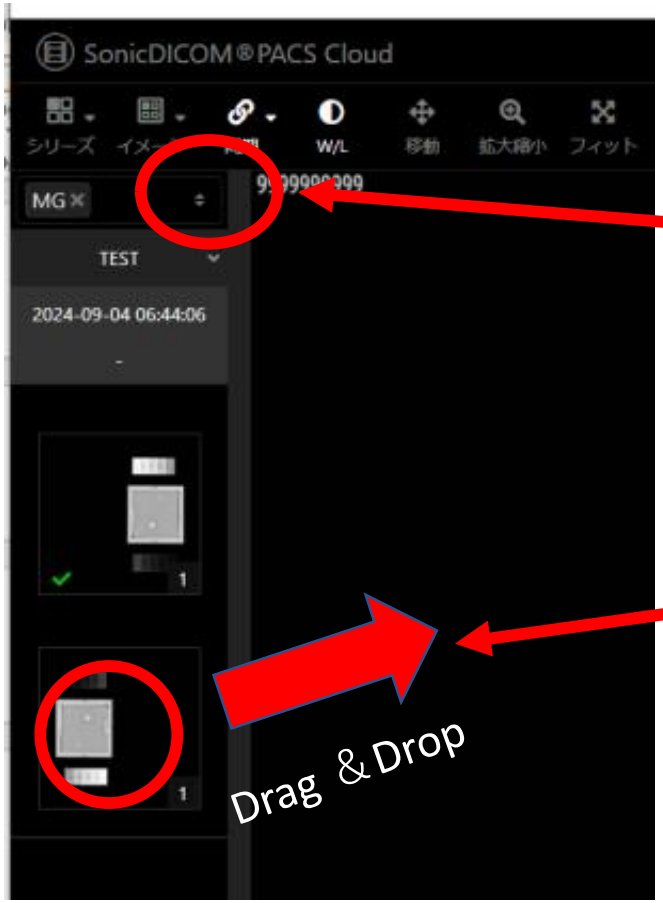


モダリティ別にサムネール選択できます。

検査画像を表示するにはサムネールをドラッグして、表示させるマスにドロップしてください。

ブラウザタブの整理

症例観察を重ねるとブラウザタブが増えます。タブごとに症例・リストを表示させたまま、タブ選択で表示切替えが可能です。
多数のタブはパソコン動作を重くする可能性がございます。その際は不要なタブから削除してください。

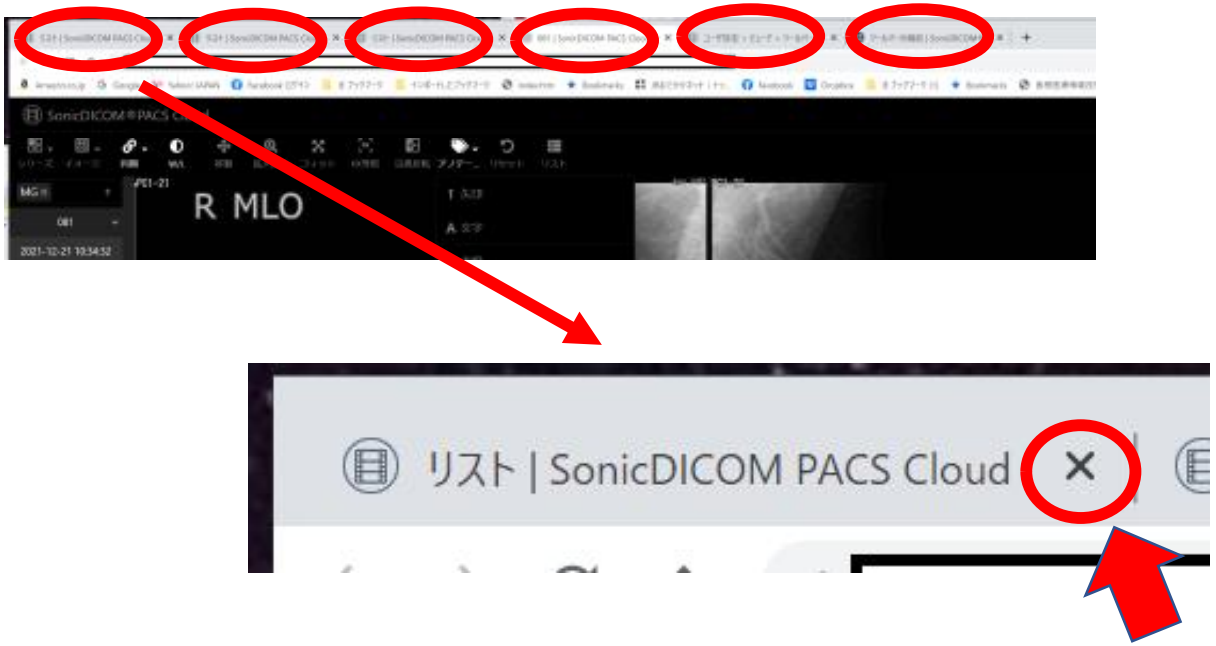

タブ削除の場合はこの「X」
をクリックして下さい。

○ 補足　ユーザマニュアル 参照方法

ビューワ操作方法の詳細はユーザマニュアルを参照してください。

ビューワ画面右上
アカウントボタン
➡ ユーザメニュー ➡ ドキュメントメニュー ➡ ユーザマニュアル









※ プライバシー保護のため、機能の一部を制限しておりますことをご了承ください。